

FR

WKB001
Mode d'emploi
WE-2020-WKB001-1

PRESSOTHÉRAPIE

VAPOZONE.COM

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.



L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	QTE.
1	JAMBE DROITE	1
2	JAMBE GAUCHE	1
3	BRAS DROIT	1
4	BRAS GAUCHE	1
5	BOTTE DROITE	1
6	BOTTE GAUCHE	1
7	TAILLE	1
8	COUVERTURE DES TUBES	1
9	TUYAU	1
10	UNITÉ PRINCIPALE	- 1
11	CÂBLE ALIMENTATION	- 1

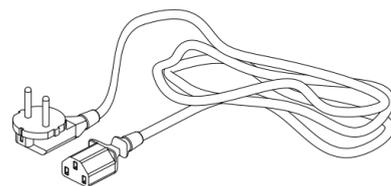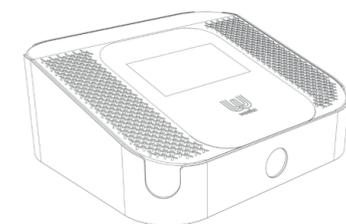

MODE D'EMPLOI

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le panneau arrière.

2. Branchez correctement les tubes sur le panneau arrière. Suivez les indications numériques.

3. Placez la couverture des tubes sur une surface plate pour que le patient puisse s'installer. Protégez la couverture avec un papier jetable afin de garantir les conditions d'hygiène appropriées.

4. Enveloppez le patient dans la robe. Rappelez-vous d'utiliser une robe jetable sous celle de pressothérapie.

5. Allumez l'appareil par le bouton frontal et faites clic sur le logo Weelko de l'écran afin de choisir les menus souhaités. .

6. Le menu "MODE" permet de choisir un des quatre programmes. Il faudrait commencer avec le programme C et après choisir les autres programmes selon les besoins du patient.

indépendante. Il faut seulement appuyer sur le bouton de chaque zone et régler l'intensité au moyen des touches « + » et « - ».

7. Le menu "LEVEL" permet de régler l'intensité de gonflage à trois niveaux.

8. Le menu "TIME" permet de choisir le temps de traitement. Le temps du programme par défaut est de 30 minutes.

9. Appuyez sur "PLAY/PAUSE" pour commencer ou pauser le traitement.

MAINTENANCE

• Utilisez une housse de protection en cellulose sous la robe de pressothérapie afin de garantir les conditions d'hygiène appropriées.

• Branchez et débranchez les tubes avec soin pour élargir leur durée de vie. De toute façon, l'appareil prévoit une couverture pour ranger les tubes afin d'éviter brancher et débrancher les tubes à chaque fois. Branchez et débranchez seulement le fil de raccordement général sur la partie arrière.

• Nettoyez la robe avec un chiffon humide après chaque traitement.

CAUTIONS

• Faites attention à ne pas serrer le coussin d'air trop fort afin d'éviter de blesser les utilisateurs.

• Vérifiez que tous les tubes sont correctement branchés.

• La pression d'air ne doit pas être trop forte pour éviter toute douleur.

• Lors d'une utilisation de l'appareil, un professionnel doit être présent à tout moment pour contrôler le bon fonctionnement.

ACCESSOIRES

JAMBE DROITE
JAMBE GAUCHE
BRAS DROIT
BRAS GAUCHE
TAILLE
BOTTE DROITE
BOTTE GAUCHE
TUYAU

ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• N'utilisez pas l'appareil avec femmes enceintes, patients avec épilepsie, patients avec un stimulateur cardiaque ou patients avec une infection cutanée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU


RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels.

Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

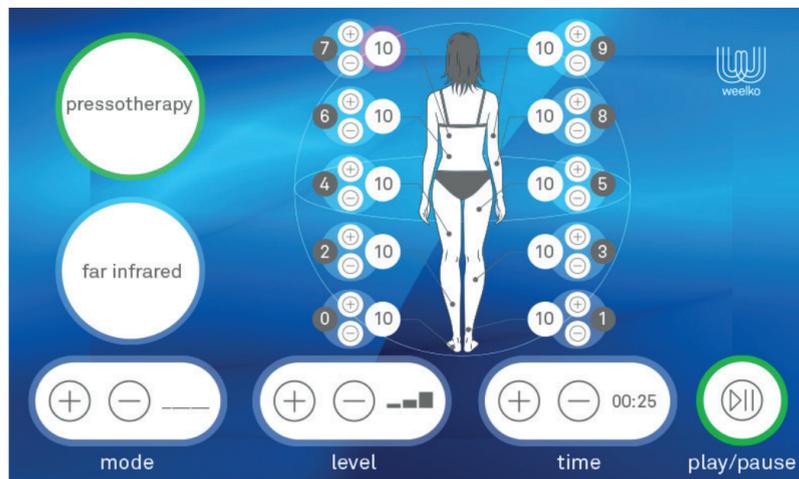

• Le programme A gonfle de la zone 0 à la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 2 se gonfle, et comme ça successivement d'un bout à l'autre. Au final, il gonfle de la zone 0 à 9 et le programme commence de nouveau.

• Le programme B gonfle de la zone 0 à la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 3 se gonfle, et comme ça successivement d'un côté à l'autre. Au final, il gonfle de la zone 0 à 9 et le programme commence de nouveau.

• Le programme C gonfle de la zone 0 à la 9. Il commence à gonfler par la zone 0 et il y ajoute la zone 1, après la zone 2 et comme ça il ajoute successivement des zones au procès de gonflage. Au final, le programme commence de nouveau.

• Le programme D gonfle les trois zones au même temps : pieds, jambes, abdomen et bras dès le bout jusqu'à la partie supérieure.

Si vous préférez travailler les zones de façon indépendante sans utiliser aucun programme, l'appareil permet de choisir chaque partie de la robe et régler son intensité de gonflage de façon

SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	66x45x40
	Poids brut (kg)	18,5
	Dimensions produit (cm)	34x38x15
Caractéristiques de travail	Puissance de travail	50 W
	Pression d'air	0-0,4 kg/cm ²
	Flux d'air	0,40 L/min.
	Rythme de pression d'air	0-15 s.
	Chenaux d'air	10 (20 bags)
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	50 W